

Erweitern Sie Ihren Behandlungsumfang und erhöhen Sie Ihren Arbeitskomfort



Vielfache Möglichkeiten, individuelle Einstellungen!

- Laufbanderhöhung für die Behandlung kleiner Hunde:
Das schont den Rücken des Therapeuten bei der Arbeit.
- Laufbandschrägstellung.
- Gegenstromanlage.
- Unterwasser-Massage mit kräftigem, regulierbarem Wasserstrahl zur Erhöhung des Rehabilitations- oder Trainingseffektes zum Beispiel bei Arbeits- und Sporthunden.
- Polumschaltung zum Wechsel der Laufbandrichtung, damit der Bewegungsablauf des Tiers von beiden Seiten beobachtet werden kann.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung abhängig vom gesundheitlichen Zustand des Patienten.
- Obergestell mit Haltegurten: ideal für die Rehabilitation von Hunden mit eingeschränkter Mobilität.

Stressfreier Umgang mit dem Hund

Einfacher Ein- und Ausstieg dank der praktischen Klapptür, mit der alle drei Modelle versehen sind. So wird keine aufwendige mechanische Hubvorrichtung benötigt, die das Tier einem unnötigen Stress aussetzt.



PHYSIO-TECH GmbH
Medizin- & Sportgerätetechnik
Preetzer Chaussee 129
24146 Kiel
Deutschland

Tel. +49 431 535502-0
Fax +49 431 535502-29
e-mail: info@physio-tech.com

PHYSIO-TECH

www.physio-tech.com

PHYSIO-TECH

Unterwasserlaufband für die Hundephysiotherapie

Ausgabe September 2010 © PHYSIO-TECH GmbH 2010

projekt realacja:  whiteart - tel. 056-674242 - www.whiteart.pl



Die Behandlungsmethode, die ideal den Bedürfnissen der heutigen Veterinärmedizin entspricht

Hundehydrotherapie mit Unterwasserlaufband ist eine seit vielen Jahren geschätzte tierärztliche Behandlungsmethode, die klassische Therapien im Bereich von Orthopädie und Neurologie ergänzt. Obwohl die Behandlungserfolge gut belegt sind, ist sie noch nicht überall bekannt.

Oft genügt auch ein operativer Eingriff nicht, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Denn nur mit entsprechender physiotherapeutischer Behandlung ist beim Hund Schmerzfreiheit, volle Nutzung des Bewegungsumfanges und Erhaltung des Muskelgewebes zu erreichen.

Ein Unterwasserlaufband ist die ideale Antwort auf wichtige Bedürfnisse der heutigen Veterinärmedizin. Und Hydrotherapie ist keine technische Spielerei, sondern eine kontrollierte Anwendung des Archimedes-Prinzips sowie der Widerstandskraft des Wassers für therapeutische Zwecke. Durch die Auftriebskraft des Wassers wird der Körper vom Gewicht entlastet, die Bewegung ist schmerzfreier und die Tiere sind motivierter, sich trotz der Erkrankung oder Verletzung zu bewegen.



Mögliche Einsatzgebiete der Hundehydrotherapie

Therapeutische Unterstützung bei:

- ▶ präoperativer Konditionierung
- ▶ postoperativer Rehabilitation
- ▶ Erkrankung im muskulären und skeletalen Bereich (Dysplasie, Arthrose, Paralyse)
- ▶ Verletzung der Bänder, Muskeln, Sehnen, Wirbelsäule
- ▶ Training gegen Fettleibigkeit
- ▶ Ausdauer- und Muskelaufbautraining für Leistungs- und Arbeitshunde




PHYSIO-TECH UNTERWASSERLAUFBAND FÜR DIE HUNDEPHYSIOTHERAPIE

AUSSTATTUNG	MODELLE		
	BASIC	XXL	DE LUXE
01 HEIZUNG	✓	✓	✓
02 POLUMSCHALTUNG	✓	✓	✓
03 UNTERWASSERMASSEGE	✓	✓	✓
04 DREISEITIGE VERGLASUNG	✓	✓	✓
05 GUMMIMATTE	✓	✓	✓
06 AUSZIEHBARE TRITTSSTUFEN	—	✓	✓
07 LAUFBANDERHÖHUNG FÜR KLEINE HUNDE	✓	✓	✓ automatisch
08 LAUFBANDSCHRÄGSTELLUNG	✓	✓ option automatisch	✓ automatisch
09 STUFENLOSE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG	✓	✓	✓
10 GASDRUCKFEDER FÜR TÜR	✓	✓	✓
11 INTERNER WASSERFILTER	✓	✓	✓
12 EXTENER WASSERFILTER MIT UV LAMPE	OPTION	✓	✓
13 VERKLEIDUNG VENTILE/VERROHRUNG	OPTION	✓	✓
14 GEGENSTROMANLAGE	OPTION	OPTION	✓
15 OBERGESTELL MIT GEHHILFE	OPTION	OPTION	✓
16 SOFTWARE AQUA PC	OPTION	OPTION	✓
17 SOFTWARE AQUA PRAXIS	OPTION	OPTION	OPTION
18 ZUBEHÖRSTÄNDER	OPTION	OPTION	✓



Die Aqua-Praxis-Software – ist eine Praxisverwaltungssoftware speziell für kleine Tierphysiotherapiepraxen

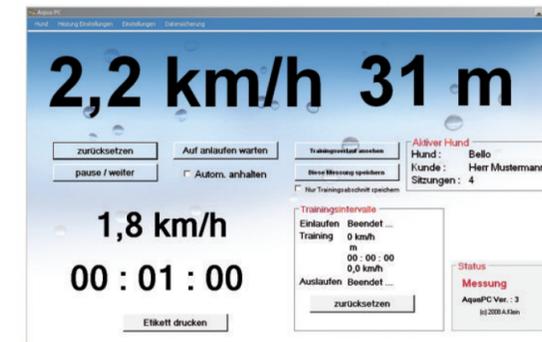

Die Aqua-PC-Software – erweitert die Möglichkeiten des Therapielaufbandes um die Erfassung von Therapiedaten

Optimale Datenverwaltung des Kunden und des Patienten

- ▶ Die Aqua-Praxis-Software – ist eine Praxisverwaltungssoftware speziell für kleine Tierphysiotherapiepraxen (Kundenverwaltung, Behandlungen, Rechnungserstellung).
- ▶ Die Aqua-PC- Software – erweitert die Möglichkeiten des Therapielaufbandes um die Erfassung von Therapiedaten.

Hygiene und wirtschaftlicher Wasserverbrauch

- ▶ Doppelte Filtrierung und Desinfektion mit UV-Lampe macht eine Langzeitverwendung des Therapiewassers möglich.
- ▶ Hochwertige Materialien und hohe Fertigungsqualität ermöglichen einfache Reinigung und Wartung.
- ▶ Laufband kann zu Reinigungs- und Wartungszwecken leicht aus dem Therapiebecken entfernt werden
- ▶ Therapiebecken und Vorratsbehälter können chemisch und mechanisch gereinigt werden.

Minimale Installationsbedingungen

- ▶ Platzbedarf für Installation nur ca. 2 m²
- ▶ Standard Stromversorgung 230 V, 16 A
- ▶ Problemloser Transport durch alle Standardtüren
- ▶ Obwohl der Vorratsbehälter mit dem Therapiebecken verbunden ist, ist er leicht abzumontieren
- ▶ Normale Belastung von Fußböden
- ▶ Badewannenarmatur zum Füllen und Reinigen
- ▶ Wasserabfluss



Service inklusive Lieferung, Installation und Einweisung

Um das beste Preis-Qualität-Service-Verhältnis auf dem Markt zu garantieren, liefert PHYSIO-TECH die Produkte direkt ab eigenem Werk aus und übernimmt die Installation und die Einweisung.