

Élargissez  
votre champ d'activité  
et pensez à votre confort de travail



**Multiplés possibilités  
et fonctions individuelles!**

- Élévation du tapis roulant pour traiter les chiens de petite taille.  
La hauteur de travail élevée du tapis roulant ménage le dos du thérapeute.
- Inclinaison du tapis roulant.
- Système à contre courant.
- Massage aquatique avec jet d'eau fort réglable.  
Pour optimiser l'effet de la rééducation ou de l'entraînement p.ex. des chiens de travail et de sport.
- Inversion de sens du tapis roulant.  
Pour faciliter l'observation le chien de devant et derrière, indépendamment de sa position dans le bassin.
- Réglage de la vitesse en fonction de l'état de santé du patient.
- Support supérieur avec harnais permet, de façon optimale, de faire une rééducation fonctionnelle chez le chien à mobilité réduite ou chiens handicapés.

**Travail sans stress avec l'animal**

L'entrée et la sortie du bassin faciles. Grâce à la porte abattante dont sont équipés tous les trois modèles. Aucun dispositif mécanique de levage compliquant l'accès et exposant l'animal au stress n'est nécessaire.



PHYSIO-TECH GmbH  
Medizin- & Sportgerätetechnik  
Preetzer Chaussee 129  
24146 Kiel  
Deutschland

Tel. +49 431 535502-20  
Fax +49 431 535502-29  
e-mail: a.gronwald@physio-tech.com

**PHYSIO-TECH**


www.physio-tech.com

Edition September 2010 © PHYSIO-TECH GmbH 2010

projekt realizacja:  whitecart - tel. 056-674242 - www.whitecart.pl

**PHYSIO-TECH**

Tapis roulant aquatique  
pour physiothérapie canine

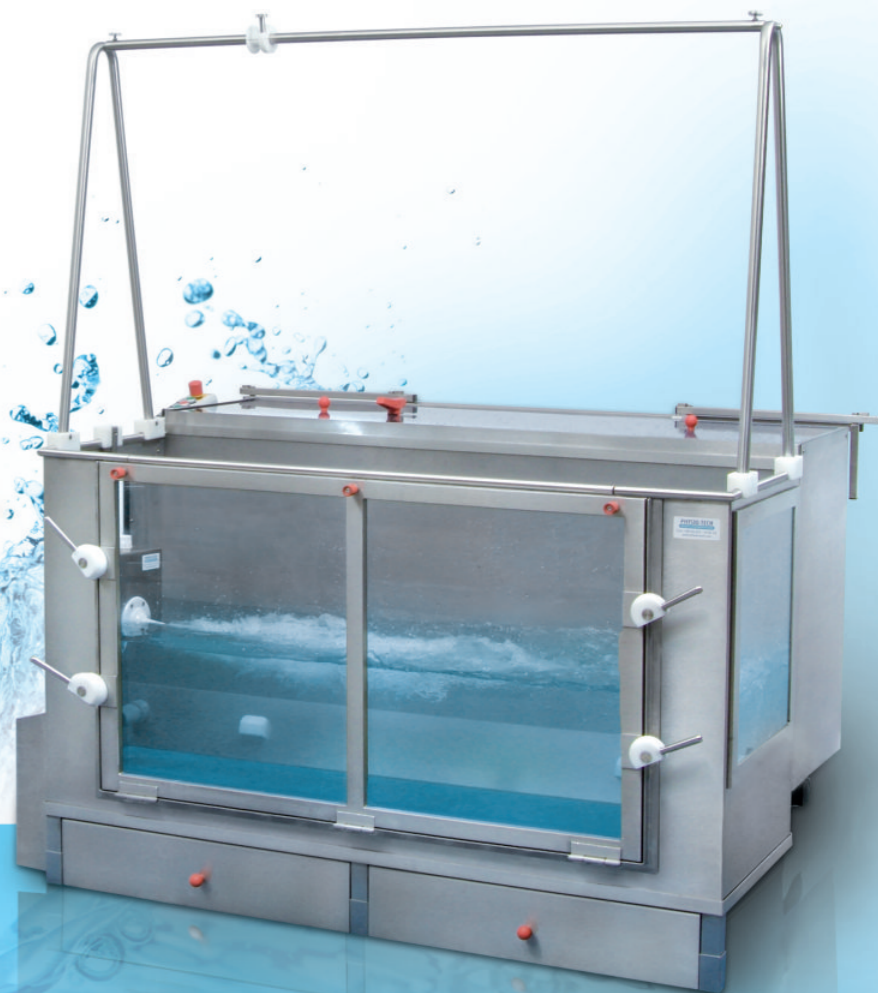


## Méthode de traitement répondant parfaitement aux besoins de la médecine vétérinaire d'aujourd'hui

L'hydrothérapie canine utilisant un tapis roulant aquatique est une méthode de traitement appréciée depuis plusieurs années par la médecine vétérinaire, en complément du traitement traditionnel dans le domaine de l'orthopédie et de la neurologie. Bien que les effets de traitement soient incontestables, le traitement est encore relativement peu connu dans certains pays.

Il arrive souvent qu'une intervention chirurgicale réussie ne suffit pas à obtenir un résultat satisfaisant de traitement. En effet, seulement le traitement de rééducation approprié permet à l'animal de bouger sans douleur et d'utiliser sa mobilité dans toute son amplitude et de développer ses muscles.

Le tapis roulant aquatique répond parfaitement aux besoins de la médecine vétérinaire d'aujourd'hui. L'hydrothérapie n'est pas un enjeu technique, mais l'application contrôlée du principe d'Archimède ainsi que la résistance de l'eau pour les besoins de la thérapie. Du fait de la portance de l'eau, l'animal se déplace facilement ce qui l'encourage à faire des exercices, sans nuire à l'intégrité articulaire ou osseuse.

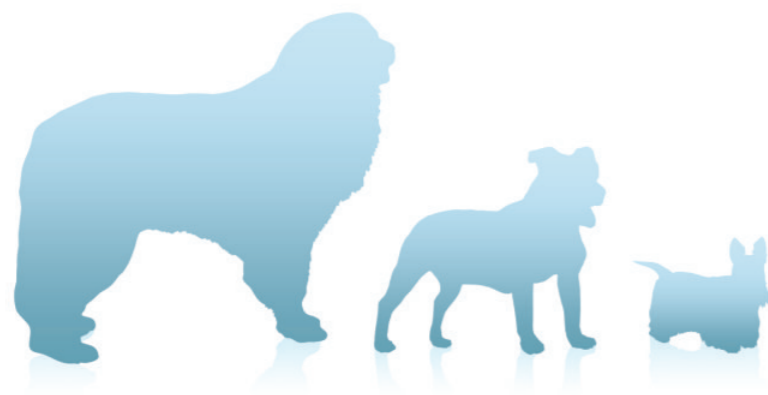

### Champ d'application de l'hydrothérapie canine

L'aide thérapeutique dans:


- conditionnement pré-opératoire
- récupération post-opératoire
- troubles musculo-squelettiques (dysplasie, arthrite, paralysie)
- blessures aux ligaments, muscles ou encore de la colonne vertébrale
- entraînement contre la surcharge pondérale
- entraînement afin d'augmenter le volume musculaire, l'entretien de la forme physique et l'endurance chez les chiens de travail et de sport

## PHYSIO-TECH TAPIS ROULANT AQUATIQUE POUR PHYSIOTHERAPIE CANINE

EQUIPEMENT	MODÈLES		
	BASIC	XXL	DE LUXE
01 CHAUFFAGE	✓	✓	✓
02 INVERSION DE SENS DU TAPIS	✓	✓	✓
03 MASSAGE AQUATIQUE	✓	✓	✓
04 VITRE DE TROIS CÔTÉS	✓	✓	✓
05 TAPIS POUR ENTREE	✓	✓	✓
06 MARCHES RETRACTABLES	—	✓	✓
07 ELEVATION POUR PETITS CHIENS	✓	✓	✓ automatique
08 INCLINAISON DU TAPIS	✓	✓ option automatique	✓ automatique
09 RÉGLAGE DE VITESSE EN CONTINU	✓	✓	✓
10 RESSORTS DE PORTE AVANT	✓	✓	✓
11 FILTRE INTERNE D'EAU	✓	✓	✓
12 FILTRE EXTERNE AVEC LAMPE UV	OPTION	✓	✓
13 PROTECTION INOX VANNES/TUYAUX	OPTION	✓	✓
14 SYSTEME À CONTRE COURANT	OPTION	OPTION	✓
15 SUPPORT SOUTIEN AVEC HARNAIS	OPTION	OPTION	✓
16 LOGICIEL INFORMATIQUE AQUA PC	OPTION	OPTION	✓
17 LOGICIEL INFORMATIQUE AQUA PRAXIS	OPTION	OPTION	OPTION
18 RANGEMENT ACCESSOIRES	OPTION	OPTION	✓



AquaPraxis – est un logiciel de gestion de patients spécialement développé pour de petits cabinets de rééducation

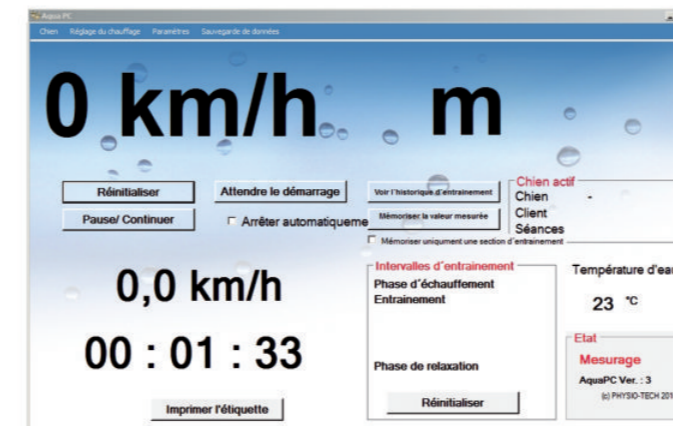

AquaPC – est un logiciel complétant le tapis roulant pour la saisie de données de l'entraînement sur le tapis roulant aquatique

### Gestion optimisée de données de clients et patients


- AquaPraxis – est un logiciel de gestion de patients et de traitements appliqués, spécialement développé pour de petits cabinets de rééducation.
- AquaPC – est un logiciel complétant le tapis roulant pour la saisie de données de l'entraînement sur le tapis roulant aquatique.

### Hygiène et économie de l'eau

- Double filtration d'eau interne et externe, avec la stérilisation par la lampe UV permettent de retenir les impuretés.
- Haute qualité de matériaux et de finitions rendent le nettoyage puis la maintenance facile.
- Tapis roulant est facile à enlever complètement.
- Nettoyage mécanique ou chimique du réservoir d'eau est possible.

### Minimum des conditions nécessaires pour l'installation

- Surface nécessaire pour l'installation 2 m² environ seulement
- Alimentation électrique standard 230 V, 16 A
- Transport sans problème à travers une porte de dimension standard
- Bien que le bassin thérapeutique soit intégré au réservoir, il est facilement démontable
- Charge au sol standard
- Robinetterie de la baignoire pour alimentation (remplissage et nettoyage)
- Conduite d'évacuation

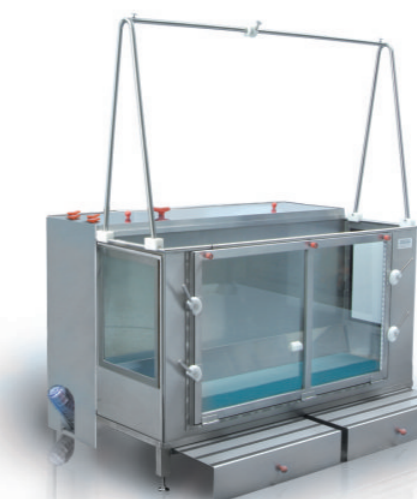

### Service inclusive livraison, installation et formation

Pour assurer le meilleur rapport prix-qualité-service sur le marché, nous livrons les produits nous mêmes de notre usine en Allemagne, nous effectuons également l'installation et la formation sur l'utilisation du tapis roulant aquatique pour vous.